

Mikrojehlová mezoterapie + mezokoktejly



MIKROJEHLOVÁ MEZOTERAPIE + MEZOKOKTEJLY



JAKÝM ZPŮSOBEM PRACUJE?

Systém k mikrovpichování kůže s nastavitelnou hloubkou od 0,2 mm do 2.2 mm aplikuje do tkáně kyselinu hyaluronovou a kapalné aktivní složky obsažené v dermokosmetice.

Zařízení pracuje s jednorázovými, sterilními kazetami určenými k mikrojechlové mezoterapii.



12 - jehlová kazeta určená k mikrojechlové mezoterapii



Díky potažení jehel stříbrem nanotechnologií se snižuje tření během propichování tkáně, což způsobuje menší škubání a také zaručuje zmizení otoků a rychlé léčení. Při malých hloubkách mikrovpichování je zákrok bezbolestný.

Zařízení obsahuje možnost regulace rychlosti práce jehel, což je velice důležité pro intenzitu vyvolání mikrokrvácení při práci v hloubce větší než 0,5 mm. V případě mikrojechlové mezoterapie se jedná o velice žádanou vlastnost.

Při mezoterapii plní mělké vpichy v hloubce menší než 0,5 mm roli vstupu pro aplikaci kosmetických přípravků, tzn. umožňuje pronikání aktivních substancí hlouběji do kůže.

Hluboké vpichy do hloubky více než 1 mm dodatečně vyvolávají fyziologické reakce kůže na poranění tak jako v případě frakcionovaných ablačních i neablačních laserů.

Kůže reaguje na mikrovpichy stejným způsobem jako na mikropoškození. Během hojení dochází k četným regeneračním a stimulačním a hojícím procesům se zvýšením podílu fibroblastů, které zvyšují produkci kolagenových, elastických vláken a kyseliny hyaluronové.

Za účelem aktivace vlastních faktorů růstu krevními destičkami musíme působit jehlami v hloubce vyšší než 1,5 mm. Při použití preparátů přímo na kůži bez mikrovpichů do hlubší vrstvy kůže proniká pouze 0,3 % aktivních prvků. Propíchnutím kůže otevíráme řadu mikrokanálků, které zůstanou otevřené po dobu 20 minut po provedení zákroku a dovolují aktivním látkám vniknout do kůže několika násobně.

Laboratoř lékařské firmy MCCM medical cosmetics doporučuje hotové mezokoktejly k mikrojechlové mezoterapii, které máme v nabídce a které se aplikují na kůži bezprostředně po provedení zákroku – mikrovpichy.



DOPORUČENÉ HLOUBKY VPICHŮ PRO KŮŽI OBLIČEJE

kůže na hlavě 0,2 ~ 0,5 mm


čelo 0,5 ~ 0,8 mm

oblast kolem očí a nosu 0,7 ~ 1,0 mm

tváře 0,8 ~ 1,5 mm

oblast kolem úst 0,5 ~ 0,8 mm

brada 0,5 ~ 1,0 mm

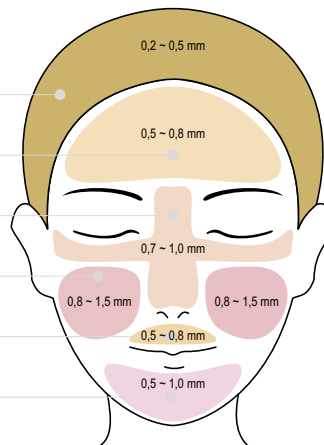

V případě působení na tělo, kde se vyskytují strie, celulitida nebo lokalizované tukové oblasti, musí být hloubka vpichů větší než 1,5 mm.

DOPORUČENÍ PRO ZÁKROK

Za účelem dosažení lepších výsledků zákroku se doporučuje použít kyselinu hyaluronovou a mezokoktejly speciálně vyrobené lékařskou firmou MCCM medical cosmetics k vyřešení různých kožních problémů.



OBLIČEJ

KOŽNÍ PROBLÉM	OMLAZENÍ	PŘEBARVENÍ	OČI	CÉVKY	AKNÉ	JIZVY	VLASY
PŘÍZNAKY	anti-aging, vrásky, tenká kůže, ztráta napnutí a elasticity, hydratace a zhuštění, revitalizace	nerovnoměrné barvy, starobní skvrny, sluneční poškození	vrásky, váčky, stíny pod očima	rozšířené cévky, zarudnutí, teleangiectázie	akné, přemastěná kůže	jizvy, jizvy po akné	plešatění, oslabené vlasy, seboroidická dermatitida hlavy
MEZOKOKTEJL	COLLAGEN PYRUVATE DMEA 3% VITAMIN C 20% ORGANICKÝ KŘEMÍK OLIGOELEMENTY Kyselina HYALURONOVÁ	VITAMIN C 20% ORGANICKÝ KŘEMÍK COLLAGEN PYRUVATE	DMAE 3% ORGANICKÝ KŘEMÍK GINKGOBILOBA 4% COLLAGEN PYRUVATE	VENOLARETH 0,5% COLLAGEN PYRUVATE VITAMIN C 20%	ANISEBORREICAS OLIGOELEMENTY VENOLARETH 0,5% VITAMIN C 20%	ORGANICKÝ KŘEMÍK VITAMIN C 20% DMEA 3% Kyselina HYALURONOVÁ	GINKGOBILOBA 4% ORGANICKÝ KŘEMÍK VITAMIN C 20%



TĚLO

KOŽNÍ PROBLÉM	CELULITIDA	MODELOVÁNÍ TĚLA	STRIE A JIZVY	REVITALIZACE A REGENERACE	ŽILNÍ A LYMFATICKÉ UCPÁNÍ	SVALOVÉ-KLOUBNÍ PROBLÉMY	NAPÍNÁNÍ A UPEVNĚVÁNÍ KŮŽE
PŘÍZNAKY	otoky, fibróza, otok v tukové tkáni	redukce lokálně uložené tukové tkáně	strie a jizvy	suchá a zničená kůže, nestejně zbarvená	otoky, pocit těžkých nohou, zpevnění cév, pomáhající při zákrocích presoterapie	otoky, výrony, bolesti kloubů a svalů	ztráta napnutí a elasticity, povislá, křehká, slabá kůže
MEZOKOKTELJ	MELILOTO COFEIN L-CARNITIN ORGANICKÝ KŘEMÍK CELLCONTROL PLUS GINKGOBILOBA 4% OLIGOELEMENTY	FOSFOTIDICOLINA MELILOTO COFEIN L-CARNITIN ORGANICKÝ KŘEMÍK DMAE 3% Kyselina HYALURONOVÁ	ORGANICKÝ KŘEMÍK DMAE 3%	ORGANICKÝ KŘEMÍK VITAMIN C 20% COLLAGEN PYRUVATE OLIGOELEMENTY Kyselina HYALURONOVÁ	MELILOTO COFEIN GINKGOBILOBA 4%	MELILOTO CREMA PARA MASAJE	ORGANICKÝ KŘEMÍK DMAE 3% COLLAGEN PYRUVATE

Zákroky jsou doporučeny pro osoby všech věkových kategorií, protože revitalizují, zpevňují nebo zvlhčují pokožku, redukovávají vrásky, přebarvení, akné, strie a celulitidu, stimuluji produkci kolagenu, elastanu a kyseliny hyaluronové, upevňují oslabené a vypadávající vlasy.

MIKROJEHLOVÁ MEZOTERAPIE + MEZOKOKTEJLY



SLOUČENÍ ZAŘÍZENÍ URČENÝCH K MEZOTERAPII S JINÝMI TECHNOLOGIEMI ZA ÚČELEM ZVÝŠENÍ EFEKTU

K maximalizaci efektů dojde spojením terapie mikrovpcichů se zákroky thermoliftingu, kavitace, radiofrekvence, IPL nebo laserové terapie.

Po zákroku se doporučuje nasvícení LED světlem.



VÝHODY MIKROJEHLOVÉ MEZOTERAPIE

- Možnost nastavení hloubky vpichů od 0,2 mm do 2,2 mm dle části těla nebo problému, na kterém pracujeme.
- Možnost změny rychlosti práce mikrojehel dle tloušťky kůže nebo očekávaného výsledku.
- Díky potažení jehel stříbrem nanotechnologií se snižuje tření během propichování tkáně, což způsobuje menší škrábání. Navíc stříbro působí antibakteriálně.
- Zařízení může pracovat jako mikrojehlová terapie nebo po změně kazety jako zařízení k permanentnímu make-upu.
- Vysoká rychlost práce – až do 120 úderů za sekundu.
- Použití jehel k mezoterapii v technologii kazet zajišťuje zachování nejvyšších bezpečnostních standardů a umožňuje regulaci hloubky provedení mikrovpcichů.
- Jednoduchost provedení zákroku na zaoblených a těžko dostupných místech.

Souprava k mezoterapii obsahuje:

zařízení,
9 kazet,
9 ampulek 10% kyseliny glykolové s vit. E + F,
9 ampulek na různé kožní problémy.



Výhradní dovozce:



SZWEDO GROUP s.c.
ul. Meblarska 3
48-200 Prudnik
tel. +48 609 464 114, +48 604 107 995, +48 601 078 278
E-mail: szwedo@szwedogroup.eu
www.szwedogroup.eu